

**remanium® 2000 +**  
**CoCrMoW-Aufbrennlegierung**  
**nach DIN EN ISO 9693 / DIN EN ISO 22674**  
**Zusammensetzung (Massen-%)**

| Co   | Cr   | Mo  | W   | Si  |
|------|------|-----|-----|-----|
| 63,0 | 23,0 | 7,0 | 5,0 | 1,5 |

Weitere Elemente unter 1%: Mn, N

Nickel-, beryllium- und eisenfrei

**Technische Daten**

|                       |                  |                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| Dehngrenze*           | R <sub>0,2</sub> | 700 MPa                               |
| Zugfestigkeit*        | R <sub>m</sub>   | 900 MPa                               |
| Härte*                | HV10             | 340                                   |
| Bruchdehnung*         | A <sub>5</sub>   | 7 %                                   |
| E-Modul*              | E                | 200 GPa                               |
| Dichte                |                  | 8,6 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Solidustemperatur     |                  | 1290 °C                               |
| Liquidustemperatur    |                  | 1415 °C                               |
| WAK (25 – 500 °C)     |                  | 14 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> |
| Farbe                 |                  | weiß                                  |
| Gewicht pro Gussstück |                  | ca. 6 g                               |

\*Chargenbezogen sind Abweichungen von +/- 10% von den angegebenen Werten möglich.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anwendung                             | CoCrMoW-Aufbrennlegierung für<br>Keramik im klassischen<br>WAK-Bereich                                |
| Schmelzen                             | Flamme, Induktion (HF), Lichtbogen  |
| Schmelzspiegelung (HF)                | Ja  |
| Gießzeitpunkt (HF)                    | Nach Aufreißen der Schmelze<br>sofort abgießen  |
| Druckguss                             | 250 – 450 mbar<br>Gebrauchsanweisung<br>REF 989-448-00 beachten!                                      |
| Schweißen                             | Mit geeigneten Verfahren wie<br>Laser- und WIG-Impuls-Schweißen                                       |
| Schweißzusatz                         | CoCr-Schweißdraht,<br>REF 528-215-10 (0,25 mm)<br>REF 528-210-10 (0,35 mm)<br>REF 528-200-10 (0,5 mm) |
| Löten vor dem Brand                   | CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00   |
| Flussmittel                           | rema®-Flux 1, REF 102-304-00  |
| Empfohlene<br>Verblendkeramik         | Im WAK-Bereich angepasste<br>Keramik, z. B. Carmen® und CCS,<br>Dentaureum                            |
| Abkühlung der Keramik<br>im Brennofen | Langzeitabkühlung, falls nicht anders<br>vom Keramikhersteller empfohlen                              |

**Weitere Angaben siehe:**

**remanium®**, edelmetallfreie Legierungen für die Kronen- und  
Brückentechnik, Gebrauchsanweisung **REF 989-448-00**

Bezug kostenfrei oder im Internet unter [www.dentaureum.com](http://www.dentaureum.com)

**Zahntechnische Hotline:** **+49 72 31 / 803 - 410**

**remanium® 2000 +**  
**CoCrMoW Bonding Alloy**  
**acc. to DIN EN ISO 9693 / DIN EN ISO 22674**

**Composition (percentage by mass)**

| Co   | Cr   | Mo  | W   | Si  |
|------|------|-----|-----|-----|
| 63.0 | 23.0 | 7.0 | 5.0 | 1.5 |

Additional elements less than 1%: Mn, N

Contains no nickel, beryllium or iron

**Technical data**

|                                 |                   |                                       |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Yield strength*                 | R <sub>p0.2</sub> | 700 MPa                               |
| Tensile strength*               | R <sub>m</sub>    | 900 MPa                               |
| Hardness*                       | HV10              | 340                                   |
| Fracture elongation*            | A <sub>5</sub>    | 7 %                                   |
| Modulus of elasticity*          | E                 | 200 GPa                               |
| Density                         |                   | 8.6 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Solidus                         |                   | 1290 °C / 2354 °F                     |
| Liquidus                        |                   | 1415 °C / 2579 °F                     |
| CTE (25 – 500 °C / 77 – 932 °F) |                   | 14 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> |
| Color                           |                   | white                                 |
| Weight per ingot                |                   | approx. 6 g                           |

\*Variations of +/- 10% are possible depending on the batch.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Use                                   | CoCrMoW bonding alloy compatible<br>with conventional ceramic materials<br>with appropriate CTE range |
| Melting                               | Torch, Induction (HF), Light arc  |
| Mirror like melt surface<br>(HF)      | Yes   |
| Exact casting<br>moment (HF)          | As soon as the oxide layer starts<br>to tear up   |
| Pressure casting                      | 250 – 450 mbar<br>Observe instructions for use<br>REF 989-448-00!                                     |
| Welding                               | Possible using methods such as laser<br>welding and TIG impulse welding                               |
| Filler material                       | CoCr welding wire,<br>REF 528-215-10 (0.25 mm)<br>REF 528-210-10 (0.35 mm)<br>REF 528-200-10 (0.5 mm) |
| Presoldering                          | CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00   |
| Flux                                  | rema®-Flux 1, REF 102-304-00  |
| Recommended<br>ceramic                | Ceramics with suitable CTE<br>range such as Carmen® and CCS,<br>from Dentaureum                       |
| Cooling of ceramics<br>in the furnace | Slow cooling, unless otherwise<br>recommended by the ceramic<br>manufacturer                          |

**For further information see:**


**remanium®**, non-precious metal alloys for crown and  
bridgework, instructions for use **REF 989-448-00**

Available free of charge from Dentaureum or on the  
internet under [www.dentaureum.com](http://www.dentaureum.com)

**Technical Hotline:** **+49 72 31 / 803 - 410**

**remanium®**  
**2000+**

CE 0483

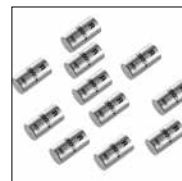

**Kurzanweisung**  
**Short instructions for use**  
**Mode d'emploi condensé**  
**Instrucciones abreviadas**  
**Brevi istruzioni per l'uso**

**D**  
**DENTAUREUM**

Für Ihre Fragen zur Verarbeitung unserer Produkte  
steht Ihnen unser Customer Support gerne zur  
Verfügung.

**Hotline Tel.-Nr. Zahntechnik +49 72 31 / 803 - 410**

**Telefonische Auftragsannahme +49 72 31 / 803 - 210**

**Mehr Informationen zu Dentaureum-  
Produkten finden Sie im Internet.**

**[www.dentaureum.com](http://www.dentaureum.com)**

Stand der Information:  
Date of information:  
Mise à jour :  
Fecha de la información:  
Data dell'informazione:

11/15

**D**  
**DENTAUREUM**

**remanium® 2000 +****Alliage céramo-métallique CoCrMoW  
selon DIN EN ISO 9693 / DIN EN ISO 22674****Composition (pourcentage par rapport à la masse)**

| Co   | Cr   | Mo  | W   | Si  |
|------|------|-----|-----|-----|
| 63,0 | 23,0 | 7,0 | 5,0 | 1,5 |

Autres éléments < à 1 % : Mn, N

Sans nickel, sans beryllium et sans fer

**Caractéristiques techniques**

|                           |                   |                                       |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Limite d'allongement*     | R <sub>p0,2</sub> | 700 MPa                               |
| Résistance à la traction* | R <sub>m</sub>    | 900 MPa                               |
| Dureté*                   | HV10              | 340                                   |
| Allongement à la rupture* | A <sub>5</sub>    | 7 %                                   |
| Module d'élasticité*      | E                 | 200 GPa                               |
| Densité                   |                   | 8,6 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Point de solidification   |                   | 1290 °C                               |
| Point de liquéfaction     |                   | 1415 °C                               |
| CDT (25 – 500 °C)         |                   | 14 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> |
| Couleur                   |                   | blanc                                 |
| Poids de chaque plot      |                   | env. 6 g                              |

\*Des écarts de +/- 10% sont possibles en fonction des lots.

| Utilisation                             | Céramiques avec coefficient de dilatation classique   |
|---|---|
| Fusion                                  | À la flamme, induction (à haute fréquence = HF), à l'arc  |
| Miroitement (HF)                        | Oui   |
| Moment de la coulée (HF)                | Après déchirure de la peau, couler sans attendre  |
| Coulée sous pression                    | 250 – 450 mbar<br>Respecter le mode d'emploi<br>REF 989-448-00!   |
| Soudage                                 | À l'aide de procédés adaptés comme le soudage au laser, le soudage au tungstène par impulsions          |
| Métal d'apport                          | Fil de soudage CoCr,<br>REF 528-215-10 (0,25 mm)<br>REF 528-210-10 (0,35 mm)<br>REF 528-200-10 (0,5 mm) |
| Brasage avant cuisson                   | CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00   |
| Antioxydant                             | rema®-Flux 1, REF 102-304-00  |
| Céramique recommandée                   | Céramique au coefficient de dilatation adapté, par exemple Carmen® e CCS de Dentaureum                  |
| Refroidissement de la céramique au four | Refroidissement lent, sauf mention contraire du fabricant de la céramique                               |

**Pour plus d'informations voir :**

**remanium®**, alliages exempts de métaux précieux pour couronnes et bridges, mode d'emploi **REF 989-448-00**

Disponible gratuitement sur simple demande ou sur Internet  
www.dentaureum.com

**Assistance téléphonique prothèse dentaire :**

**+49 72 31 / 803-411**

**remanium® 2000 +****Aleación de CoCrMoW para cerámica  
según DIN EN ISO 9693 / DIN EN ISO 22674****Composición (porcentaje en masa)**

| Co   | Cr   | Mo  | W   | Si  |
|------|------|-----|-----|-----|
| 63,0 | 23,0 | 7,0 | 5,0 | 1,5 |

Otros elementos por debajo del 1%: Mn, N

Libre de níquel, beryllium y hierro

**Características técnicas**

|                            |                   |                                       |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Limite de dilatación*      | R <sub>p0,2</sub> | 700 MPa                               |
| Resistencia a la tracción* | R <sub>m</sub>    | 900 MPa                               |
| Dureza*                    | HV10              | 340                                   |
| Dilatación de rotura*      | A <sub>5</sub>    | 7 %                                   |
| Módulo de elasticidad*     | E                 | 200 GPa                               |
| Densidad                   |                   | 8,6 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Solidus                    |                   | 1290 °C                               |
| Liquidus                   |                   | 1415 °C                               |
| CET (25 – 500 °C)          |                   | 14 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> |
| Color                      |                   | blanco                                |
| Peso de cada bloquecito    |                   | 6 g aprox.                            |

\*Referente al lote, los datos indicados pueden variar entre +/- 10%.

| Empleo                                  | Aleación de CoCrMoW para cerámica para emplear con porcelanas con un ámbito de CET clásico                                |
|---|---|
| Fusión                                  | Llama de soplete, inducción (alta frecuencia = AF), arco voltaico   |
| Reflejo de la fusión (AF)               | Sí  |
| Momento oportuno del colado (AF)        | Al romperse y abrirse la masa fundida colar de inmediato  |
| Colado a presión                        | 250 – 450 mbar<br>¡Observar el modo de empleo<br>REF 989-448-00!  |
| Soldar                                  | Con procedimientos adecuados como soldo por láser y por impulsos WIG  |
| Material de adición para soldo          | Alambre de CoCr para soldar con láser,<br>REF 528-215-10 (0,25 mm)<br>REF 528-210-10 (0,35 mm)<br>REF 528-200-10 (0,5 mm) |
| Soldadura antes de la cocción           | CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00   |
| Fundente                                | rema®-Flux 1, REF 102-304-00  |
| Cerámica recomendable                   | Cerámica adaptada al ámbito del CET, p. ej. Carmen® y CCS, Dentaureum   |
| Enfriamiento de la cerámica en el horno | Enfriamiento lento, en caso de que el fabricante de la cerámica no recomiende otra cosa                                   |

**Para más informaciones véase:**

**remanium®**, aleaciones no preciosas para coronas y puentes, modo de empleo **REF 989-448-00**

Entrega gratuita o en Internet en www.dentaureum.com

**Línea telefónica directa (Hot line) para odontotécnica:**

**+49 72 31 / 803-411**

**remanium® 2000 +****Legga a base di CoCrMoW per ceramiche  
sec. DIN EN ISO 9693 / DIN EN ISO 22674****Composizione (percentuale)**

| Co   | Cr   | Mo  | W   | Si  |
|------|------|-----|-----|-----|
| 63,0 | 23,0 | 7,0 | 5,0 | 1,5 |

Altri elementi < 1%: Mn, N

Priva di Ni, Be, e Fe

**Dati tecnici**

|                           |                   |                                       |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Limite d'espansione*      | R <sub>p0,2</sub> | 700 MPa                               |
| Resistenza alla trazione* | R <sub>m</sub>    | 900 MPa                               |
| Durezza*                  | HV10              | 340                                   |
| Espansione di rottura*    | A <sub>5</sub>    | 7 %                                   |
| Modulo di elasticità*     | E                 | 200 GPa                               |
| Densità (peso specifico)  |                   | 8,6 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Punto stato solido        |                   | 1290 °C                               |
| Punto stato liquido       |                   | 1415 °C                               |
| CET (tra 25 e 500 °C)     |                   | 14 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> |
| Colore                    |                   | argento chiaro                        |
| Peso per lingotto         |                   | ca. 6 g                               |

\*Da lotto a lotto i valori indicati possono differire di +/- 10%.

| Impiego                                 | Legga di CoCrMoW per ceramiche dell'area CET classica  |
|---|--|
| Fusione                                 | Cannello, induzione (HF), arco voltaico  |
| Aspetto fusione<br>"occhio di bue" (HF) | Sì   |
| Punto di colata (HF)                    | Colare dopo l'apertura della pellicola superficiale  |
| Pressofusione                           | 250 – 450 mbar<br>Osservare le modalità d'uso<br>REF 989-448-00!   |
| Saldatura                               | Con metodo appropriato come impulso laser o WIG  |
| Apporto di materiale                    | Filo per saldatura in CoCr,<br>REF 528-215-10 (0,25 mm)<br>REF 528-210-10 (0,35 mm)<br>REF 528-200-10 (0,5 mm) |
| Saldatura primaria<br>Fluente           | CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00<br>rema®-Flux 1, REF 102-304-00  |
| Ceramica consigliata                    | Appropriata ceramica dell'area CET, ad es. Carmen® e CCS, Dentaureum   |
| Raffreddamento della ceramica in forno  | Raffreddamento lento, se non consigliato diversamente dal produttore della ceramica                            |

**Per ulteriori informazioni vedi:**

**remanium®**, leghe non preziose per ponti e corone  
Modalità d'uso **REF 989-448-00**

Può essere richiesto gratuitamente al numero: (+39) 051/86.25.80

**Servizio assistenza clienti:**

**(+39) 051 / 86.50.084**